







## DE GEBRAUCHSANWEISUNG

- PRODUKTBE SCHREIBUNG** Askin® Calgitol® THIN ist eine sterile Wundauflage. Sie besteht aus einer ionischen Silberalginat-Matrix, eine breite antimikrobielle Wirksamkeit bietet und zur Vermeidung von Kontamination durch weitere Keime beiträgt. Bei geschwundenen Wunden geriert die Silberalginat-Matrix und bildet ein feuchtes Wundmilieu, das den natürlichen Heilungsprozess fördert. Das Wundexsudat wird von Askin® Calgitol® THIN nicht absorbiert.
- ANWENDUNGSWEISE** Askin® Calgitol® THIN eignet sich für die Behandlung von oberflächlichen bis tiefen Wunden. Dekubitalgeschwüren (Schweregrade I - IV), Ulcera cruris (venös), Verletzungen zweiten Grades und Hautstapeniesen. Die Wundauflage ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Sie kann nach Ermenen des behandelnden Arztes unter ärztlicher Aufsicht zur Behandlung von infizierten Wunden eingesetzt werden.
- VORSICHTSMASSNAHMEN** Bei Vorliegen einer klinischen Infektion kann topisches Silber eine erforderliche systemische Therapie oder eine andere geeignete Infektionsbehandlung nicht ersetzen.
- CONTRAINDICATIONS / INFORMACIONES / INFORMAZIONI** Askin® Calgitol® THIN darf nicht bei Patienten mit bekannten Überempfindlichkeitsreaktionen auf Silber angewendet werden. Askin® Calgitol® THIN darf nicht angewendet werden, wenn Askin® Calgitol® THIN auf bereits behandelte Wunden aufgetragen wird. Askin® Calgitol® THIN ist sehr einfach aufzutragen. Es sind keine speziellen Fähigkeiten oder Ausstattungen erforderlich. Askin® Calgitol® THIN kann einige Tage auf der Wunde verbleiben, bis der Sekundärverband gewechselt werden muss.
- Vorbereitung der Wunde** a) Reinigen Sie die Wunde mit steriler Kochsalzlösung (0,9 %) oder einer geeigneten Wundreinigungslösung und sterilen Tupfern.
- Die umgebende Haut muss trocken sein.
- Aufbringen der Wundauflage** Wählen Sie die passende Größe von Askin® Calgitol® THIN aus, welche die komplette Oberfläche der Wunde bedeckt. Bevor Sie die Schutzfolie entfernen, schneiden Sie Askin® Calgitol® THIN so zu, dass die Größe genau auf die Wunde passt. Falls erforderlich, können mehrere Verbände überlappt aufgelegt werden, um sehr große Wunden zu überbrücken. Schneiden Sie die Schutzfolie.
- Legen Sie die Askin® Calgitol® THIN Wundauflage auf oberflächliche Wunden auf bzw. in tiefe Wunden hinein. Beide Seiten der Wundauflage können auf der Patienten Seite des Wundes (Schweregrade I - IV), Ulcera cruris (venös), Verletzungen zweiten Grades und Hautstapeniesen. Die Wundauflage ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Sie kann nach Ermenen des behandelnden Arztes unter ärztlicher Aufsicht zur Behandlung von infizierten Wunden eingesetzt werden.
- VORSICHTSMASSNAHMEN** Bei Vorliegen einer klinischen Infektion kann topisches Silber eine erforderliche systemische Therapie oder eine andere geeignete Infektionsbehandlung nicht ersetzen.
- CONTRAINDICATIONS / INFORMACIONES / INFORMAZIONI** Askin® Calgitol® THIN darf nicht bei Patienten mit bekannten Überempfindlichkeitsreaktionen auf Silber angewendet werden. Askin® Calgitol® THIN darf nicht angewendet werden, wenn Askin® Calgitol® THIN auf bereits behandelte Wunden aufgetragen wird. Askin® Calgitol® THIN ist sehr einfach aufzutragen. Es sind keine speziellen Fähigkeiten oder Ausstattungen erforderlich. Askin® Calgitol® THIN kann einige Tage auf der Wunde verbleiben, bis der Sekundärverband gewechselt werden muss.
- Vorbereitung der Wunde** a) Reinigen Sie die Wunde mit steriler Kochsalzlösung (0,9 %) oder einer geeigneten Wundreinigungslösung und sterilen Tupfern.

erforderlich. Sollte sich nach 4 - 6 Wochen Behandlungsdauer mit Askin® Calgitol® THIN noch keine Besserung eingestellt haben, wird empfohlen, die ursprüngliche Diagnose und die gesamte Therapie in Übereinstimmung mit anerkannten Wundbehandlungspraktiken neu zu bewerten.

**7. LAGERUNGSSTABILISATIONEN/BEZEICHNUNG** Die Wundauflagen bei Raumtemperatur trocken und ohne direkte Sonnenstrahlung lagern.

**STERILE | R** = Sterilisation durch Gammaabstrahlung  
 = Recycle  
 = Chargennummer  
 = Bestellnummer

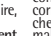



 = Achtung: Gebrauchsanweisung beachten  
 = Verwendbar bis: Jahr und Monat  
 = Hersteller

Die Sterilität ist gewährleistet, solange die Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt ist.

**8. PRODUKTANGEBOT** Askin® Calgitol® THIN ist in den folgenden Größen erhältlich:  
 • 5 x 5 cm  
 • 10 x 10 cm  
 • 10 x 20 cm  
 • 15 x 15 cm  
 • 20 x 20 cm  
 • 20 x 40 cm  
 • 30 x 30 cm  
 • 40 x 40 cm

## FR MODE D'EMPLOI

**1. DESCRIPTION DU PRODUIT** Askin® Calgitol® THIN est un pansement stérile composé d'une matrice d'alginate d'argent sous forme ionique, ayant une activité antimicrobienne et une capacité de contraction après 4 à 6 semaines de traitement avec Askin® Calgitol® THIN. Le diagnostic initial et le type de traitement devront être réévalués comme cela se fait dans les pratiques courantes de soins des plaies.

**7. STOCKAGE/STABILISATION SYMBOLES** Utiles sur emballage. Conserver les pansements à température ambiante, à l'abri des rayons solaires (☀) et de l'humidité (💧).  
**STERILE | R** = stérilisé par irradiation  
 = À usage unique  
 = Attention, voir mode d'emploi  
 = À utiliser avant : année et mois  
 = Fabricant


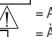


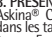
**2. INDICATIONS** Askin® Calgitol® THIN est indiqué pour le traitement de lésions de profondeur partielle à totale, ulcères de decubitus de base I à IV, ulcères veneux, quemaduras de segundo grado y zonas de extracción de órganos/miembros. Está indicado exclusivamente para uso externo y se puede utilizar para el tratamiento de lesiones infectadas bajo supervisión médica a discreción del médico.

**3. PRECAUTIONS D'EMPLOI** En cas d'infection clinique, la prate de application topica ne substituit la nécessité de thérapeutica sistemica ou d'outro tratamiento adecuado para infecciones.  
**4. CONTRAINDICATIONS / INFORMACIONES / INFORMAZIONI** Askin® Calgitol® THIN ne doit pas être appliqué sur des plaies présentant une cicatrisation en cours.  
**5. INFORMATION FOR PATIENTS** Askin® Calgitol® THIN est un pansement stérile composé d'une matrice d'alginate d'argent sous forme ionique, ayant une activité antimicrobienne et une capacité de contraction après 4 à 6 semaines de traitement avec Askin® Calgitol® THIN. Le diagnostic initial et le type de traitement devront être réévalués comme cela se fait dans les pratiques courantes de soins des plaies.

**6. REMARQUES** La taille de la plaie peut sembler augmenter après le début du traitement avec Askin® Calgitol® THIN. Ceci est normal et arrive dès lors que les débris sont éliminés de la plaie, permettant ainsi à la cicatrisation de débuter.  
**7. LAGERUNGSSTABILISATIONEN/BEZEICHNUNG** Die Wundauflagen bei Raumtemperatur trocken und ohne direkte Sonnenstrahlung lagern.

la cicatrisation soit sans évolution en raison d'autres facteurs liés à des conditions sous-jacentes. Dans ce cas, l'utilisation d'Askin® Calgitol® THIN ne suffira pas et nécessitera un traitement approprié des conditions sous-jacentes. En l'absence d'amélioration après 4 à 6 semaines de traitement avec Askin® Calgitol® THIN, le diagnostic initial et le type de traitement devront être réévalués comme cela se fait dans les pratiques courantes de soins des plaies.


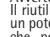
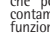


**8. PRESENTACION** Askin® Calgitol® THIN está disponible en los siguientes tamaños:  
 • 5 x 5 cm  
 • 10 x 10 cm  
 • 10 x 20 cm  
 • 15 x 15 cm  
 • 20 x 20 cm  
 • 20 x 40 cm  
 • 30 x 30 cm  
 • 40 x 40 cm

**STERILE | R** = Estérilizado através de radiações gama  
 = Reciclar  
 = Número de lote  
 = Atencion, ver instrucciones de uso  
 = Utilizar antes: año e mes  
 = Fabricante

**2. INDICACIONES** Askin® Calgitol® THIN está indicado para el tratamiento de lesiones de profundidad parcial a total, úlceras de decubito de base I a IV, úlceras venoas, quemaduras de segundo grado y zonas de extracción de órganos/miembros. Está indicado exclusivamente para uso externo y se puede utilizar para el tratamiento de lesiones infectadas bajo supervisión médica a discreción del médico.

**3. PRECAUTIONS D'EMPLOI** En cas d'infection clinique, la prate de application topica ne substituit la nécessité de thérapeutica sistemica ou d'outro tratamiento adecuado para infecciones.  
**4. CONTRAINDICATIONS / INFORMACIONES / INFORMAZIONI** Askin® Calgitol® THIN ne doit pas être appliqué sur des plaies présentant une cicatrisation en cours.  
**5. INFORMATION FOR PATIENTS** Askin® Calgitol® THIN est un pansement stérile composé d'une matrice d'alginate d'argent sous forme ionique, ayant une activité antimicrobienne et une capacité de contraction après 4 à 6 semaines de traitement avec Askin® Calgitol® THIN. Le diagnostic initial et le type de traitement devront être réévalués comme cela se fait dans les pratiques courantes de soins des plaies.

## IT ISTRUZIONI PER L'USO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO** Askin® Calgitol® THIN è una medicazione sterile composta da una matrice di alginato d'argento sotto forma ionica, che consente l'efficacia antimicrobica ad ampio spettro e contribuisce a prevenire la contaminazione da parte di batteri esterni. In presenza di esudato la matrice di alginato d'argento gelifica, formando una condizione di umidità favorevole alla naturale cicatrizzazione della lesione. Askin® Calgitol® THIN non assorbe l'esudato della lesione.
- INDICAZIONI** Askin® Calgitol® THIN è indicata per il trattamento di lesioni a spessore inter o parziale, ulcere da pressione di stadio I - IV, ulcere venosi, ustioni di secondo grado e siti di prelievo. È indicata esclusivamente per uso esterno e a discrezione del medico e sotto supervisione medica, può essere usata per il trattamento di lesioni infette.
- PRECAUZIONI** In caso di infezione clinica, l'argento topico non si sostituisce al trattamento appropriato o ad altro trattamento sistemico di infezioni.
- CONTRAINDICAZIONI / INFORMAZIONI DI SICUREZZA** Askin® Calgitol® THIN non è indicata per l'uso su pazienti con sensibilità accertata agli alginati o all'argento. L'uso di Askin® Calgitol® THIN può essere controindicato in presenza di metalli e controindicata per le ulcere derivanti da infezioni, quali tubercolosi, filiasi o infezioni micotiche profonde, e per le ustioni di terzo grado. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta.
- ISTRUZIONI PER L'USO** a) Pulire la zona della ferita con soluzione fisiologica sterile allo 0,9% o altra soluzione fisiologica adeguata per la ferita, e tamponi sterili.
- Asciugare la cute perilesionale.
- Applicazione della medicazione** Askin® Calgitol® THIN deve essere applicata in modo da coprire completamente la lesione. Prima di rimuovere il foglio protettivo, Askin® Calgitol® THIN deve essere applicato in modo che si adatti alle dimensioni della lesione. Se necessario, si possono sovrapporre diverse medicazione per adattare a lesioni di elevate dimensioni.
- Rimuovere le pellicole protettive.
- Posizionare Askin® Calgitol® THIN su lesioni superficiali oppure completamente all'interno di lesioni profonde.
- La medicazione può essere applicata sulla lesione da entrambi i lati.
- Coprire con la medicazione per almeno 24 ore. In ogni caso, se dopo 4-6 settimane di trattamento con Askin® Calgitol® THIN non si riscontrano evidenti segni di miglioramento, è opportuno riconsiderare l'intero percorso terapeutico adottato.
- CONSERVAZIONE / STERILIZZAZIONE / SIMBOLI SULLE ETICHETTE** Conservare le medicazioni a temperatura ambiente, al riparo dalla luce diretta del sole (☀) e dall'umidità (💧).
- STERILE | R** = Sterilizzate a raggi gamma  
 = Prodotto monouso  
 = Numero di lotto  
 = Attenzione: leggere le istruzioni per l'uso  
 = Data di scadenza: mese e anno  
 = Produttore
- Sterile se la confezione è integra e chiusa.
- PRESENTAZIONE** Askin® Calgitol® THIN è disponibile nelle seguenti misure:  
 • 5 x 5 cm  
 • 10 x 10 cm  
 • 10 x 20 cm  
 • 15 x 15 cm  
 • 20 x 20 cm  
 • 20 x 40 cm  
 • 30 x 30 cm  
 • 40 x 40 cm

che precludono la cicatrizzazione; pertanto, si consiglia un eventuale ricorso ad altro trattamento appropriato per il controllo delle infezioni.

**5.3.1** Continuare a detergere a fondo la ferita con soluzione fisiologica sterile allo 0,9% per agevolare il distacco della medicazione.

**5.3.2** Continuare a detergere a fondo la ferita con soluzione fisiologica sterile allo 0,9% per agevolare il distacco della medicazione.

**5.3.3** Continuare a detergere a fondo la ferita con soluzione fisiologica sterile allo 0,9% per agevolare il distacco della medicazione.

**5.3.4** Per l'applicazione della nuova medicazione, attenersi alle procedure ai punti 5.1 e 5.2.

**5.3.5** Continuare a detergere a fondo la ferita con soluzione fisiologica sterile allo 0,9% per agevolare il distacco della medicazione.

## PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- DESCRÇÃO DO PRODUTO** O Askin® Calgitol® THIN é uma medicao estérilizada, constituída por uma matriz de alginato de prata iónica, que é um potente agente antimicrobiano que ajuda a prevenir a contaminação por infeções externas. Em feridas exsudativas, a matriz de alginato de prata gelifica, formando um ambiente húmido para a ferida, favorecendo a cicatrização natural das feridas.
- INDICAÇÕES** O Askin® Calgitol® THIN é indicado para o tratamento de feridas de extensão média a elevada, úlceras de pressão de grau I a IV, úlceras venozas, queimaduras de segundo grau e locais de transplante.
- CONSERVAÇÃO / ESTERILIZAÇÃO / SIMBÓLOS SULLE ETICHETTE** Conservar as medicaciones a temperatura ambiente, al riparo dalla luce diretta del sole (☀) e dall'umidità (💧).
- STERILE | R** = Sterilizzate a raggi gamma  
 = Prodotto monouso  
 = Numero di lotto  
 = Attenzione: leggere le istruzioni per l'uso  
 = Data di scadenza: mese e anno  
 = Produttore
- Sterile se la confezione è integra e chiusa.
- PRESENTAZIONE** Askin® Calgitol® THIN è disponibile nelle seguenti misure:  
 • 5 x 5 cm  
 • 10 x 10 cm  
 • 10 x 20 cm  
 • 15 x 15 cm  
 • 20 x 20 cm  
 • 20 x 40 cm  
 • 30 x 30 cm  
 • 40 x 40 cm

## CS NÁVOD K POUŽITÍ

- POPIS PRODUKTU** Krytí Askin® Calgitol® THIN je sterilní krytí s maticí z iontového alginátu stříbrného, který zajišťuje širokou antimikrobiální účinnost a schopnost zabránit kontaminaci bakteriemi z vnějšího prostředí. Při exsudaci z rány se alginát stříbrný přemění na gel, čímž vytvoří vlhké prostředí v ráně, které podporuje podmínky přirozené hojení. Je indikováno pouze pro vnější použití a může být použito při péči o infikované rány pod zdravotnickým dohledem a za přítomnosti zdravotnického personálu.
- BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ** V případě klinické infekce nenahrazuje topické stříbro nutnost systémové léčby nebo odstranění infekce.
- CONTRAINDIKACE / BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE** Krytí Askin® Calgitol® THIN nesmí používat u pacientů se známou přecitlivělostí na alginát nebo zinkový stříbro. Krytí Askin® Calgitol® THIN se nesmí používat v případech, kdy je kontraindikována přítomnost kovu. Krytí Askin® Calgitol® THIN je kontraindikováno u vědu vznikajících následkem infekce, jako je například tuberkulóza, syfilis nebo hubička mykotická infekce, a u populární tříštné stupně. Pokud je balení poškozeno nebo otevřeno, produkt nepoužívejte.
- INFORMACE PRO POUŽITÍ** Krytí Askin® Calgitol® THIN se velmi snadno aplikuje a jeho použití nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti nebo vybavení. Mohou nastat případy, kdy je hojení rány zhořeno vlivem přirozených stavů; v tomto případě krytí Askin® THIN není nutné měnit několik dní, dokud se nezačne hojení.

## ES INSTRUCCIONES DE USO

- DESCRIPCION DEL PRODUCTO** Askin® Calgitol® THIN es un apósito estéril compuesto de una matriz de alginato de plata iónica de gran eficacia eó. En l'absence d'amélioration après 4 à 6 semaines de traitement avec Askin® Calgitol® THIN, le diagnostic initial et le type de traitement devront être réévalués comme cela se fait dans les pratiques courantes de soins des plaies.
- INDICACIONES** Askin® Calgitol® THIN está indicado para el tratamiento de lesiones de profundidad parcial a total, úlceras de decubito de base I a IV, úlceras venoas, quemaduras de segundo grado y zonas de extracción de órganos/miembros. Está indicado exclusivamente para uso externo y se puede utilizar para el tratamiento de lesiones infectadas bajo supervisión médica a discreción del médico.
- PRECAUTIONS D'EMPLOI** En cas d'infection clinique, la prate de application topica ne substituit la nécessité de thérapeutica sistemica ou d'outro tratamiento adecuado para infecciones.  
**4. CONTRAINDICATIONS / INFORMACIONES / INFORMAZIONI** Askin® Calgitol® THIN ne doit pas être appliqué sur des plaies présentant une cicatrisation en cours.  
**5. INFORMATION FOR PATIENTS** Askin® Calgitol® THIN est un pansement stérile composé d'une matrice d'alginate d'argent sous forme ionique, ayant une activité antimicrobienne et une capacité de contraction après 4 à 6 semaines de traitement avec Askin® Calgitol® THIN. Le diagnostic initial et le type de traitement devront être réévalués comme cela se fait dans les pratiques courantes de soins des plaies.
- 6. PRESENTACION** Askin® Calgitol® THIN está disponible en los siguientes tamaños:  
 • 5 x 5 cm  
 • 10 x 10 cm  
 • 10 x 20 cm  
 • 15 x 15 cm  
 • 20 x 20 cm  
 • 20 x 40 cm  
 • 30 x 30 cm  
 • 40 x 40 cm

## NL GEBRUIKSAANWIJZING

- PRODUCTBESCHRIJVING** Askin® Calgitol® THIN is een steriel verband, bestaande uit een matrix van ioniserend zilveralginaat, dat een breed antimicrobiële werkzaamheid heeft en helpt contaminatie door externe bacteriën te voorkomen. In de aanwezigheid van wondexsudaat vormt de zilveralginaat matrix een gel, zodat er een vochtig wondmilieu ontstaat dat de natuurlijke genezingsomstandigheden bevordert. Askin® Calgitol® THIN absorbeert geen wondexsuaat.
- INDICATIES** Askin® Calgitol® THIN is geïndiceerd voor de behandeling van oppervlakkige tot diepe wonden, decubitus in stadium I - IV, veneuze ulcera, tweedegraads brandwonden en huddormorplasies. Het is uitsluitend geïndiceerd voor uiterlijke gebruik en kan worden toegepast bij de behandeling van geïnficeerde wonden onder medisch toezicht.
- VOORZORGSMAATREGELEN** Bij een klinische infectie neemt topisch zilver niet de noodzaak toe voor een systemische therapie of een andere passende behandeling van de infectie.
- CONTRAINDICATIONS / INFORMACIONES / INFORMAZIONI** Askin® Calgitol® THIN mag niet worden gebruikt bij patiënten met bekende overgevoeligheden voor alginat of zilver. Askin® Calgitol® THIN worden gecontra-indiceerd wanneer een contra-indicatie bestaat voor de aanwezigheid van metalen. Askin® Calgitol® THIN worden gecontra-indiceerd voor ulcera die het gevolg zijn van een infectie (bijv. tuberculose, syfilis of diepe schimmelinfecties) en diepgaand brandwonden. Het is normaal en terecht wanneer wondresteren van de randen van de wond worden verwijderd. Dit bevoordert de volgende maten:  
 • 5 x 5 cm  
 • 10 x 10 cm  
 • 10 x 20 cm  
 • 15 x 15 cm  
 • 20 x 20 cm  
 • 20 x 40 cm  
 • 30 x 30 cm  
 • 40 x 40 cm

## DE GEBRUIKSAANWIJZING

- PRODUCTBESCHRIJVING** Askin® Calgitol® THIN is een steriel verband, bestaande uit een matrix van ioniserend zilveralginaat, dat een breed antimicrobiële werkzaamheid heeft en helpt contaminatie door externe bacteriën te voorkomen. In de aanwezigheid van wondexsudaat vormt de zilveralginaat matrix een gel, zodat er een vochtig wondmilieu ontstaat dat de natuurlijke genezingsomstandigheden bevordert. Askin® Calgitol® THIN absorbeert geen wondexsuaat.
- INDICATIES** Askin® Calgitol® THIN is geïndiceerd voor de behandeling van oppervlakkige tot diepe wonden, decubitus in stadium I - IV, veneuze ulcera, tweedegraads brandwonden en huddormorplasies. Het is uitsluitend geïndiceerd voor uiterlijke gebruik en kan worden toegepast bij de behandeling van geïnficeerde wonden onder medisch toezicht.
- VOORZORGSMAATREGELEN** Bij een klinische infectie neemt topisch zilver niet de noodzaak toe voor een systemische therapie of een andere passende behandeling van de infectie.
- CONTRAINDICATIONS / INFORMACIONES / INFORMAZIONI** Askin® Calgitol® THIN mag niet worden gebruikt bij patiënten met bekende overgevoeligheden voor alginat of zilver. Askin® Calgitol® THIN worden gecontra-indiceerd wanneer een contra-indicatie bestaat voor de aanwezigheid van metalen. Askin® Calgitol® THIN worden gecontra-indiceerd voor ulcera die het gevolg zijn van een infectie (bijv. tuberculose, syfilis of diepe schimmelinfecties) en diepgaand brandwonden. Het is normaal en terecht wanneer wondresteren van de randen van de wond worden verwijderd. Dit bevoordert de volgende maten:  
 • 5 x 5 cm  
 • 10 x 10 cm  
 • 10 x 20 cm  
 • 15 x 15 cm  
 • 20 x 20 cm  
 • 20 x 40 cm  
 • 30 x 30 cm  
 • 40 x 40 cm

## EN INSTRUCTIONS FOR USE

- PRODUCT DESCRIPTION** Askin® Calgitol® THIN is a sterile dressing, consisting of an ionic silver alginate matrix, which provides for broad antimicrobial effectiveness and prevents contamination from external bacteria. In the presence of wound exudate, the silver alginate matrix gels to form a moist wound environment conducive to natural healing conditions. Askin® Calgitol® THIN does not absorb wound exudate.
- INDICATIONS** Askin® Calgitol® THIN is indicated for the management of partial to full thickness wounds, stage I - IV pressure ulcers, venous ulcers, second degree burns and donor sites.
- PRECAUTIONS** In the event of clinical infection, topical silver does not replace the need for systemic therapy or other adequate infection treatment.
- CONTRAINDICATIONS / SAFETY INFORMATION** Askin® Calgitol® THIN should not be used on patients with a known sensitivity to alginates or silver. Askin® Calgitol® THIN should not be used where the presence of metals is contraindicated. Askin® Calgitol® THIN is contraindicated for ulcers resulting from infection, such as tuberculosis, syphilis, or deep fungal infection, and for third degree burns. Do not use if pack is damaged or opened.

- PRODUCT DESCRIPTION** Askin® Calgitol® THIN is a sterile dressing, consisting of an ionic silver alginate matrix, which provides for broad antimicrobial effectiveness and prevents contamination from external bacteria. In the presence of wound exudate, the silver alginate matrix gels to form a moist wound environment conducive to natural healing conditions. Askin® Calgitol® THIN does not absorb wound exudate.
- INDICATIONS** Askin® Calgitol® THIN is indicated for the management of partial to full thickness wounds, stage I - IV pressure ulcers, venous ulcers, second degree burns and donor sites.
- PRECAUTIONS** In the event of clinical infection, topical silver does not replace the need for systemic therapy or other adequate infection treatment.
- CONTRAINDICATIONS / SAFETY INFORMATION** Askin® Calgitol® THIN should not be used on patients with a known sensitivity to alginates or silver. Askin® Calgitol® THIN should not be used where the presence of metals is contraindicated. Askin® Calgitol® THIN is contraindicated for ulcers resulting from infection, such as tuberculosis, syphilis, or deep fungal infection, and for third degree burns. Do not use if pack is damaged or opened.

- PRODUCT DESCRIPTION** Askin® Calgitol® THIN is a sterile dressing, consisting of an ionic silver alginate matrix, which provides for broad antimicrobial effectiveness and prevents contamination from external bacteria. In the presence of wound exudate, the silver alginate matrix gels to form a moist wound environment conducive to natural healing conditions. Askin® Calgitol® THIN does not absorb wound exudate.
- INDICATIONS** Askin® Calgitol® THIN is indicated for the management of partial to full thickness wounds, stage I - IV pressure ulcers, venous ulcers, second degree burns and donor sites.
- PRECAUTIONS** In the event of clinical infection, topical silver does not replace the need for systemic therapy or other adequate infection treatment.
- CONTRAINDICATIONS / SAFETY INFORMATION** Askin® Calgitol® THIN should not be used on patients with a known sensitivity to alginates or silver. Askin® Calgitol® THIN should not be used where the presence of metals is contraindicated. Askin® Calgitol® THIN is contraindicated for ulcers resulting from infection, such as tuberculosis, syphilis, or deep fungal infection, and for third degree burns. Do not use if pack is damaged or opened.

- PRODUCT DESCRIPTION** Askin® Calgitol® THIN is a sterile dressing, consisting of an ionic silver alginate matrix, which provides for broad antimicrobial effectiveness and prevents contamination from external bacteria. In the presence of wound exudate, the silver alginate matrix gels to form a moist wound environment conducive to natural healing conditions. Askin® Calgitol® THIN does not absorb wound exudate.
- INDICATIONS** Askin® Calgitol® THIN is indicated for the management of partial to full thickness wounds, stage I - IV pressure ulcers, venous ulcers, second degree burns and donor sites.
- PRECAUTIONS** In the event of clinical infection, topical silver does not replace the need for systemic therapy or other adequate infection treatment.
- CONTRAINDICATIONS / SAFETY INFORMATION** Askin® Calgitol® THIN should not be used on patients with a known sensitivity to alginates or silver. Askin® Calgitol® THIN should not be used where the presence of metals is contraindicated. Askin® Calgitol® THIN is contraindicated for ulcers resulting from infection, such as tuberculosis, syphilis, or deep fungal infection, and for third degree burns. Do not use if pack is damaged or opened.

- PRODUCT DESCRIPTION** Askin® Calgitol® THIN is a sterile dressing, consisting of an ionic silver alginate matrix, which provides for broad antimicrobial effectiveness and prevents contamination from external bacteria. In the presence of wound exudate, the silver alginate matrix gels to form a moist wound environment conducive to natural healing conditions. Askin® Calgitol® THIN does not absorb wound exudate.
- INDICATIONS** Askin® Calgitol® THIN is indicated for the management of partial to full thickness wounds, stage I - IV pressure ulcers, venous ulcers, second degree burns and donor sites.
- PRECAUTIONS** In the event of clinical infection, topical silver does not replace the need for systemic therapy or other adequate infection treatment.
- CONTRAINDICATIONS / SAFETY INFORMATION** Askin® Calgitol® THIN should not be used on patients with a known sensitivity to alginates or silver. Askin® Calgitol® THIN should not be used where the presence of metals is contraindicated. Askin® Calgitol® THIN is contraindicated for ulcers resulting from infection, such as tuberculosis, syphilis, or deep fungal infection, and for third degree burns. Do not use if pack is damaged or opened.

- PRODUCT DESCRIPTION** Askin® Calgitol® THIN is a sterile dressing, consisting of an ionic silver alginate matrix, which provides for broad antimicrobial effectiveness and prevents contamination from external bacteria. In the presence of wound exudate, the silver alginate matrix gels to form a moist wound environment conducive to natural healing conditions. Askin® Calgitol® THIN does not absorb wound exudate.
- INDICATIONS** Askin® Calgitol® THIN is indicated for the management of partial to full thickness wounds, stage I - IV pressure ulcers, venous ulcers, second degree burns and donor sites.
- PRECAUTIONS** In the event of clinical infection, topical silver does not replace the need for systemic therapy or other adequate infection treatment.
- CONTRAINDICATIONS / SAFETY INFORMATION** Askin® Calgitol® THIN should not be used on patients with a known sensitivity to alginates or silver. Askin® Calgitol® THIN should not be used where the presence of metals is contraindicated. Askin® Calgitol® THIN is contraindicated for ulcers resulting from infection, such as tuberculosis, syphilis, or deep fungal infection, and for third degree burns. Do not use if pack is damaged or opened.

- PRODUCT DESCRIPTION** Askin® Calgitol® THIN is a sterile dressing, consisting of an ionic silver alginate matrix, which provides for broad antimicrobial effectiveness and prevents contamination from external bacteria. In the presence of wound exudate, the silver alginate matrix gels to form a moist wound environment conducive to natural healing conditions. Askin® Calgitol® THIN does not absorb wound exudate.
- INDICATIONS** Askin® Calgitol® THIN is indicated for the management of partial to full thickness wounds, stage I - IV pressure ulcers, venous ulcers, second degree burns and donor sites.
- PRECAUTIONS** In the event of clinical infection, topical silver does not replace the need for systemic therapy or other adequate infection treatment.
- CONTRAINDICATIONS / SAFETY INFORMATION** Askin® Calgitol® THIN should not be used on patients with a known sensitivity to alginates or silver. Askin® Calgitol® THIN should not be used where the presence of metals is contraindicated. Askin® Calgitol® THIN is contraindicated for ulcers resulting from infection, such as tuberculosis, syphilis, or deep fungal infection, and for third degree burns. Do not use if pack is damaged or opened.

- B. Braun Medical Ltd.**, Sheffield S35 2PW, United Kingdom  
**B. Braun Melsungen AG/OPM**, 34212 Melsungen, Germany  
**B. Braun Medical**, 92680 Brougven-Cedex, France  
**B. Braun Medical SA**, 08191 Rubí (Barcelona), Spain  
**B. Braun Medical B.V.**, 5342 CW Oss, Holland  
**B. Braun Milano S.p.A.**, 20161 Milano, Italy  
**B. Braun Medical, Lda.**, 27300-053 Barcarena, Portugal  
**B. Braun Medical s.r.o.**, 148 00 Praha 4, Czech Republic  
**B. Braun Medical Kft.**, 10223 Budapest, Hungary  
**B. Braun Medical s.r.o.**, 851 01 Bratislava, Slovakia  
**ООО "Б.Браун Медикал"**, 191040, СПб, ул Пущинская, 10  
**B. Braun Medical AG**, 6204 Sempach, Switzerland  
**B. Braun Austria GmbH**, 2344 Maria Enzersdorf, Austria  
**B. Braun Medical N.V./S.A.**, 1831 Diegem, Belgium  
**B. Braun Medikal Diş Tic. A.Ş.**, Tekstilçik Koza Plaza 34235 Esenler, Istanbul

- B. Braun Medical A/S**, Dirch Passers Alle 27, 3. sal, 2000 Frederiksberg.  
**Transcare Healthcare Malaysia Sdn. Bhd**, 46350 Petaling Jaya, Malaysia  
**Laboratórios B. Braun S.A**, São José do Rio Preto, Brazil  
**DKSH Healthcare**, Bangkok 10100, Thailand  
**Adcock Ingram Critical Care**, Johannesburg 2000, South Africa  
**B. Braun Medical Chile S.A.**, Santiago, Chile  
**Imexcomed S.R.L.**, La Paz, Bolivia  
**Dismed S.A.**, San Salvador CA, Salvador  
**B. Braun Medical A.S.**, W-3142 Vestsgøgen  
**B. Braun Medical Oy**, 00100 Helsinki, Finland  
**Виосер S.A. Parenteral Solution Industry**, PO Box 35 42100 Tassiachtes-Trikala, Greece  
**B. Braun Medical AB**, Box 110, 182 12 Danderyd  
**B. Braun Medical S.R.L.**, Remetea Mare 307350, România  
**B.Браун Медикал ЕООД**, Младост 2, 1799 София, България  
**B. Braun Medical OÜ**, Kadaka tee 708, 12618 Tallinn

- B. Braun Medical Ltd.**, Collooney, Co. Sligo  
**B. Braun Medical A/S**, Dirch Passers Alle 27, 3. sal, 2000 Frederiksberg.  
**Transcare Healthcare Malaysia Sdn. Bhd**, 46350 Petaling Jaya, Malaysia  
**Laboratórios B. Braun S.A**, São José do Rio Preto, Brazil  
**DKSH Healthcare**, Bangkok 10100, Thailand  
**Adcock Ingram Critical Care**, Johannesburg 2000, South Africa  
**B. Braun Medical Chile S.A.**, Santiago, Chile  
**Imexcomed S.R.L.**, La Paz, Bolivia  
**Dismed S.A.**, San Salvador CA, Salvador  
**B. Braun Medical A.S.**, W-3142 Vestsgøgen  
**B. Braun Medical Oy**, 00100 Helsinki, Finland  
**Виосер S.A. Parenteral Solution Industry**, PO Box 35 42100 Tassiachtes-Trikala, Greece  
**B. Braun Medical AB**, Box 110, 182 12 Danderyd  
**B. Braun Medical S.R.L.**, Remetea Mare 307350, România  
**B.Браун Медикал ЕООД**, Младост 2, 1799 София, България  
**B. Braun Medical OÜ**, Kadaka tee 708, 12618 Tallinn

- B. Braun Medical Ltd.**, Sheffield S35 2PW, United Kingdom  
**B. Braun Melsungen AG/OPM**

